

**NEU
BEI UNS!**

COVID-19

ANTIKÖRPER- SCHNELLTEST

Direkt am Point-of-Care!



Testresultat nach
15 Minuten!



Finecare™ 2019-nCoV RBD Antikörpertest

Inklusive Finecare™ II Plus Universal-Analysegerät*



Bewerten der
Impfstoff-Wirkung



Auswerten einer
Infektion



Test mit Blut aus
der Fingerkuppe



Deutsche Touch-
Benutzeroberfläche



**Thiefes
Medical**

Global Managements & Trades for medical supplies

+49 152 598 614 03 // info@thiefes.com

thiefes.com

*Bei Abnahme von mindestens 1.000 Antikörpertesteinheiten (40 Packungen)

JETZT INFORMIEREN






ANTIKÖRPERTEST – SCHNELL. EFFIZIENT. PROFITABEL.

So effizient war die SARS CoV-2 Antikörperbestimmung noch nie. Wenn Sie einen Test direkt durchführen erhalten Sie das Ergebnis nach nur 15 Minuten.

Nach Lagerung der Testkassette für 15 Minuten erhalten Sie das Testergebnis bereits nach ca. 15 Sekunden. Dies ermöglicht multiple Tests innerhalb kurzer Zeit.

IN 4 SCHRITTEN ZUM TESTERGEBNIS

Um einen Test durchzuführen benötigen Sie keine weiteren Materialien. Unser Antikörper-Testset beinhaltet alle notwendigen Testgegenstände.

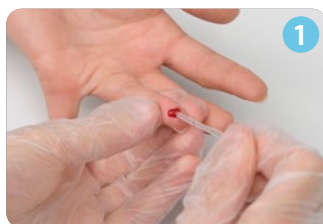

BLUT ENTNEHMEN

Mit beiliegender Lanzette die Fingerkuppe anstechen. Auch mit Blutplasma oder -serum möglich.



PROBE VORBEREITEN

Mit beiliegender Pipette 20 µl Vollblut, Serum oder Plasma in Pufferföhrchen geben und mischen.



PROBE AUFTRAGEN

75 µl der Probenmischung entnehmen und auf das Probenauftragsfeld der Testkassette applizieren.



TEST DURCHFÜHREN

Testkassette in das Finecare™ II Plus Universal-Analysegerät einsetzen und Test starten

IM TESTKIT ENHALTEN

- ✓ ID-Chip zur Identifikation des Testtyps
- ✓ Testkassetten
- ✓ Vorbefüllte Pufferfläschchen
- ✓ Kapillarpipetten
- ✓ Sterile Einweglanzetten
- ✓ Pipettenspitzen
- ✓ Desinfektionstücher
- ✓ Gebrauchsanweisung

TESTERGEBNIS DIREKT AUSDRUCKEN

Nach dem die Probe getestet wurde und das Ergebnis vorliegt, können Sie das Testergebnis mit dem Finecare™ II Plus Universal-Analysegerät ausdrucken.





FINECARE™ II PLUS – UNIVERSELL EINSETZBAR!

Werten Sie mit dem Finecare™ II Plus Universal-Analysegerät und unseren Testkassetten bis zu 34 Blut-, Urin- oder Stuhlparameter direkt bei Ihnen am Point-of-Care aus – Das erspart Ihnen Zeit und Laborkosten.

Durch die schnelle Auswertung können so bis zu 300 Tests/h durchgeführt werden – dazu liefern wir Ihnen mit dem Finecare™ II Plus eine Haltestation mit 5 Einschüben und 5 Timern.



FINECARE™ II PLUS – DIE PARAMETER IM ÜBERBLICK

- ✓ 2019-nCoV-Antikörpertest
- ✓ 2019-nCoV-Antigentest
- ✓ Marker für Diabetes und Nierenschädigungen
- ✓ Entzündungs-Marker
- ✓ Schilddrüsenfunktion
- ✓ Marker für Schädel-Hirn-Verletzungen
- ✓ Vitamin D
- ✓ Fertilität
- ✓ Koagulation
- ✓ Herz-Marker
- ✓ Tumor-Marker
- ✓ u.m.

DAS ERGEBNIS – QUALITÄT. QUANTITÄT.

Bei der Auswertung erhalten Sie nicht nur qualitative Auskunft über ein negatives bzw. positives Ergebnis, sondern auch eine quantitative Auskunft über die genaue Anzahl der Antikörper im Blut.


WHO-Standardisiertes-Verfahren zur Ermittlung des Schwellenwertes WHO International Standard for anti-SARS-CoV-2 immunoglobulin Norm:NIBSC-code:20/136.

FINECARE™ II PLUS – TECHNISCHE DATEN



LIS-SCHNITTSTELLE

LAN-, USB-, D-Sub-Anschlüsse stehen als Schnittstellen zur Verfügung. Per LAN-Kabel kann mit einem LIS kommuniziert werden.

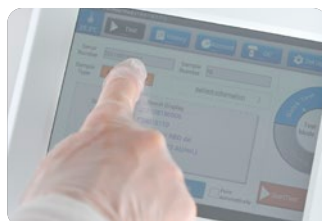

TOUCHSCREEN

Das Finecare™ II Universal-Analysegerät wird mit einem intuitiven Touchscreen in deutscher Sprache ausgeliefert.



KASSETTEN EINSCHUB

Der Einschub für die Testkassetten kann per Touchscreen bedient werden und ist kompatibel mit allen Finecare Testkassetten.



ID-CHIP EINSCHUB

Jedes Testset beinhaltet eine individuelle ID-Chip, mit der der Testtyp des Sets angegeben wird. Sie müssen nichts weiter einstellen.



UNSERE FINECARE-ANGEBOTE

Wir bieten Ihnen verschieden Startangebote an mit denen Sie direkt in den Testprozess einsteigen können. Wir beraten Sie auch gerne.

UMFANGREICHES SORTIMENT

Sie können sich die Angebote auch mit anderen Testeinheiten aus unserem Sortiment zusammenstellen. Wir bieten Ihnen unter anderem Tests für Vitamin D, Diabetes, Entzündungs-Marker uvm. an.

ANGEBOT 1

1.000 Testeinheiten
6,90 € pro St. // entspricht 40 Pkg.



1 Finecare™ II Plus
Universal-Analysegerät für 0,- €



ANGEBOT 2

500 Testeinheiten
6,90 € pro St. // entspricht 20 Pkg.



1 Finecare™ II Plus
Universal-Analysegerät für 199,- €



ANGEBOT 3

250 Testeinheiten
6,90 € pro St. // entspricht 10 Pkg.



1 Finecare™ II Plus
Universal-Analysegerät für 549,- €



ANGEBOT 4

1 Finecare™ II Plus
Universal-Analysegerät – als Einzelgerät



899 €

SPRECHEN SIE UNS AN

+49 152 598 614 03

info@thiefes.com

thiefes.com



**Thiefes
Medical**

Global Managements & Trades for medical supplies

Gehrken Wiese 3 // 49459 Lembruch // +49 152 598 614 03 // info@thiefes.com

thiefes.com